

Aquaneering entwirft große Aquarienanlagen mit mehreren Gestellen für Zebrafische und andere aquatische Forschungsmodelle. Die Systeme sind so konzipiert, dass sie die Unterbringungskapazität maximieren, um den Anforderungen Ihrer Forschungseinrichtung gerecht zu werden. Die Ingenieure von Animalab und Aquaneering arbeiten eng mit Kunden und Architekten zusammen, um das beste Systemdesign zu entwickeln. Den Forschern wird geholfen, ihre Ziele zu erreichen, ganz gleich, ob es sich um bestehende Gebäude oder Neubauten handelt.

AQUANEERING


INCORPORATED



Freistehende (Stand-alone) Gestelle

Das Haltungssystem besteht aus einem Gestell und Umlauffilterung, das bis zu 2 850 ausgewachsene Zebrafische aufnehmen kann. Das Stand-Alone-System verfügt über eine neue Ventilart, UV-Edelstahl und eine Pulverbeschichtung für den 316-Edelstahl-Rahmen. Die Wirbelbett-Biofiltertechnologie sorgt für hervorragende Wasserqualitätsbedingungen, einschließlich Null Ammoniak- und Nitritwerten. Es stellt sicher, dass Ihre Fische in einer gesunden Beckenumgebung gedeihen.

- Optionen mit 4 bis 8 Fächern
- Doppelseitige Optionen
- Optionale Funktionen umfassen automatische Dosierung und Fernüberwachung mit Alarmbenachrichtigung und cloudbasiertem Zugriff auf die Systemparameter.

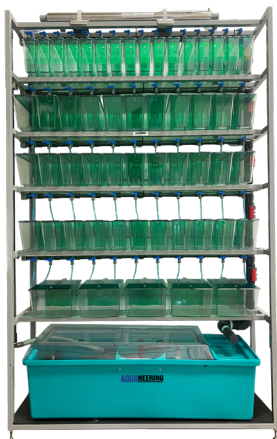

z-Rack, die kostengünstigste Lösung für Zebrafische

z-Rack ist ein spezielles System, das für jedes Aquarienlabor geeignet ist. Das Gestell ist ein vorgefertigtes Haltungssystem mit 5 Regalen und Umwälzfilterung, das über 1.500 ausgewachsene Zebrafische aufnehmen kann. Es ist so konzipiert, dass es so einfach und bequem wie möglich einzurichten ist; einfach Wasser hinzufügen!

- Einzelnes Gestell mit 5 Regalen
- Behälterkonfiguration: oberes Regal – 16 Behälter 1,8 l; mittlere Regale – 11 Behälter 2,8 l; unteres Regal – 5 Behälter 6 l

Zebrafisch-Tischgestell

Das Tischsystem mit eigener Komplettfiltration, einschließlich des wartungsfreien Wirbelschicht-Biofilters, ist ideal für die Haltung einer kleinen Zebrafischkolonie.

- Standardbehälterkonfiguration: oberes Regal – 16 Behälter 1,8 l; mittlere Regale – 11 Behälter 2,8 l; unteres Regal – 5 Behälter 6 l
- Zu den optionalen Funktionen gehören automatische Dosierung und Fernüberwachung mit Alarmbenachrichtigung und cloud-basiertem Zugriff auf die Systemparameter



Freistehende Xenopus laevis Gestelle

Das XS360 ist ein Haltungssystem mit 3 Regalen und Umwälzfilterung, das bequem über 100 erwachsene Xenopus laevis aufnehmen kann. Das Wasserfiltersystem wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Xenopus in einer möglichst gesunden Umgebung gedeihen.

- Vierstufiges Filtersystem mit wartungsfreiem Biofilter und nicht nachweisbaren Ammoniakwerten
- Einstellbare Durchflusskontrolle für jedes Becken und jede Beckenreihe mit Präzisionsventilen

AquaFlex – Freistehende Aquakultur für eine Vielzahl von Arten

Ganz gleich, ob Sie mit Höhlenfischen, Killifischen, Neunaugen, wirbellosen Meerestieren oder einer Vielzahl anderer Forschungsmodelle forschen, Aquaneering bietet flexible Haltungslösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden.

- Freishehendes Gestell mit 3 Fächern
- Erhältlich mit Glas- oder Kunststoffbecken
- Kann als Multirack-System integriert werden, unterstützt durch ein zentrales Filtrationspaket
- Biologische Filtration über wartungsfreie Wirbelbett-Biofilter, die keine Ammoniakanteile enthalten



E-rack – Einstieg in die Welt der Zebrafisch-Aquaristik

Es handelt sich um ein kleines und kompaktes System in optimaler Höhe für die Sichtbarkeit im Klassenzimmer und ist ein hervorragender Einstieg in den Bereich Aquaristik.

- Ausgestattet mit: 5 Becken 2,8 l; 8 Becken 1,8 l, 4 Kreuzungsbecken 1 l
- Selbständige vierstufige
- Wasserfiltration: Wirbelbett-Biofilter, mechanischer Filter, Kohlefilter, Ultraviolettfilter
- Rollen für die Beweglichkeit